

AIRGUARD® BEZPIECZNE ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ


Elementy naszych bezpiecznych, grawitacyjnych zestawów do podawania infuzji, które zwiększają bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności:

- AirGuard®
- EasyPrime®
- Pomocniczy Zacisk Bezpieczeństwa
- Bezigłowy port SecureConnect
- Filtr

AirGuard®

Unikalne materiały i technologia produkcji AirGuard® automatycznie i niezawodnie zatrzymują infuzję i zapobiegają przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu pojemnika z płynem i komory kroplowej. Udowodniono, że nasza technologia zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo przed przedostaniem się powietrza do linii infuzyjnej.

W komorze kroplowej znajduje się filtr cząstek stałych, który zatrzymuje cząstki o wielkości 15µm i większe.

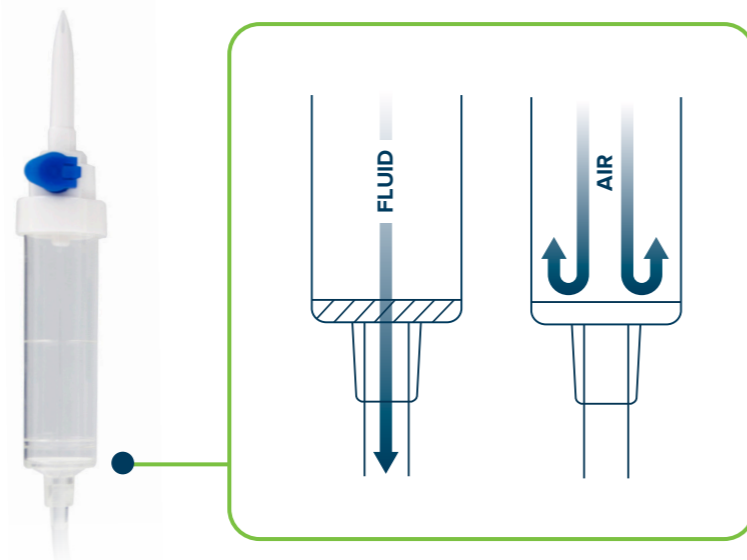


EasyPrime®

EasyPrime®, dystalna nasadka ochronna zawiera membranę hydrofobową, która automatycznie zatrzymuje płyn usuwając powietrze z drenu.

EasyPrime® automatycznie sprawia, że wypełnianie zestawu płynem jest szybkie i wolne od rozlewania.


- EasyPrime® upraszcza proces wypełniania zestawu
- Zapobiega rozlewaniu się płynu i utrzymuje suchy obszar roboczy
- EasyPrime® sprawia, że wypełnianie zestawu płynem jest szybkie i bezpieczne

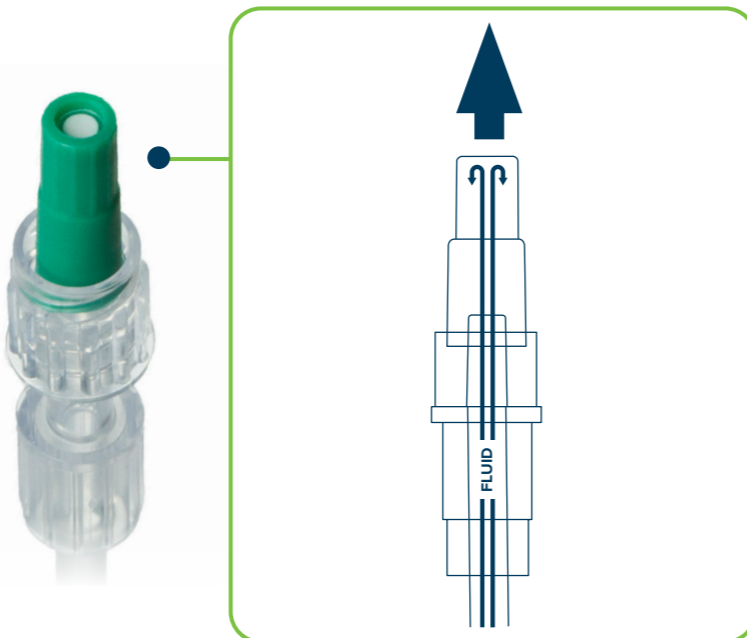

Pomocniczy Zacisk Bezpieczeństwa

Każdy bezpieczny zestaw AirGuard® jest wyposażony w nasadkę EasyPrime® i pomocniczy zacisk bezpieczeństwa.

- Pomocniczy zacisk bezpieczeństwa jest dostarczany jako dodatek do standardowego zacisku rolkowego, tuż nad nim.
- Pomocniczy zacisk bezpieczeństwa zapewnia wtórne zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem przepływu.
- Pomocniczy zacisk bezpieczeństwa oszczędza czas, ponieważ infuzję można niezawodnie zatrzymać jednym kliknięciem.
- Dzięki zaciskowi zmiana opakowania z płynem infuzyjnym jest szybka, łatwa i bezpieczna.

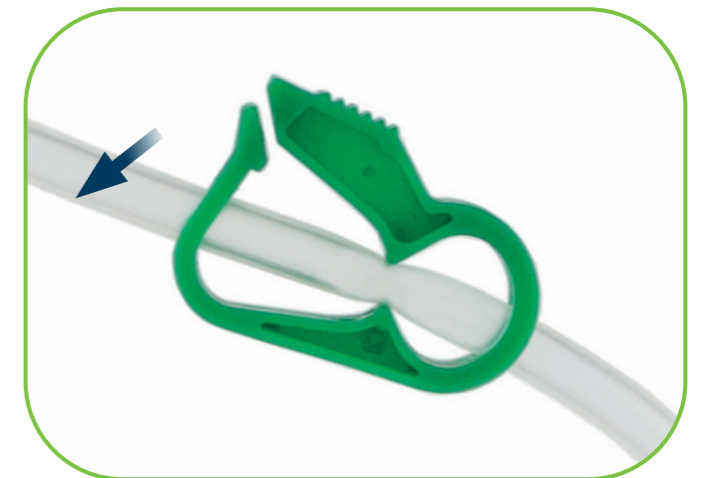

Zastawka antyrefluksyjna

(opcjonalnie, dostępna w wybranych produktach)

- Zastawka antyrefluksyjna zapobiega cofaniu się krwi oraz płynów infuzyjnych do zestawu grawitacyjnego AirGuard® z innej linii infuzyjnej lub bolusa strzykawkowego podawanego za dystalnym końcem zestawu AirGuard®.
- Wyposażona w zintegrowane standardowe złącze Luer-Lock, które umożliwia podłączenie bezpiecznego zestawu AirGuard® do dowolnego standardowego złącza Luer-Lock (np. rampa 3-drożna, złącza bezigłowe itp.)



Bezigłowy dostęp SecureConnect®

(opcjonalnie, dostępna w wybranych produktach)

W przypadku infuzji wymagających dodatkowego dostępu do głównej linii infuzyjnej, nasze bezpieczne zestawy AirGuard® są również dostępne z miejscem bezigłowego dostępu SecureConnect®.

Używaj zestawów z SecureConnect®, aby chronić personel medyczny i pacjentów przed zranieniem igłą i zmniejszyć ryzyko zakażeń krwi.

- Bezigłowy dostęp SecureConnect® został zaprojektowany, aby pomóc zmniejszyć ryzyko zakażeń krwi.
- Kompatybilne ze wszystkimi strzykawkami typu Luer-Lock (w tym szklanymi), a także strzykawkami Luer-Slip.
- Pomagają spełnić wymagania dyrektywy UE dotyczącej stosowania wyrobów bezigłowych.

